

UNItears® bez konzervačních látek

oční kapky, roztok

Tento výrobek je zdravotnický prostředek. Před použitím si prosím přečtěte tuto uživatelskou příručku. Uchovejte si tyto písemné informace. Možná si je budete muset znovu přečíst.

Popis přípravku

UNItears bez konzervačních látek, roztok, jsou oční kapky bez konzervačních látek, které obsahují hypromelózu a dexpanthenol jako hlavní složky. Oční roztok je plněn do vícedávkové lahvičky uzavřené speciálním uzávěrem Novelia. Lahvička je označena štítkem a zabalena v papírové krabičce spolu s návodem k použití.

1 ml roztoku obsahuje 20 kapek.

Hydratace a zvlhčení očí

Oční kapky UNItears bez konzervačních látek vytvářejí na rohovce a spojivce dočasný ochranný film, který snižuje odpařování slz a tím zabraňuje dalšímu poškození povrchu oka v důsledku nedostatku slzné tekutiny. Hydratační a ochranný účinek přípravku slouží jako náhrada za nedostatečnou tvorbu slz.

Regenerace očního povrchu

Dexpanthenol použitý jako přísada napomáhá rychlejší regeneraci buněk na povrchu rohovky a spojivky. Produkt je proto určen i k epitelizaci rohovky a spojivky po poranění oka nebo operaci.

Složení roztoku:

Hlavní složka: Hypromelóza 5 mg v 1 ml.
Pomocné látky: dexpanthenol, chlorid sodný, disodná sůl edetátu, čištěná voda.

Pomocné látky se známým účinkem:
dexpanthenol 10 mg v 1 ml (1 %).

Nositelé kontaktních čoček:

UNItears neobsahuje konzervační látky, takže je vhodný pro nositele kontaktních čoček a pro osoby s citlivými očima.

Určené použití

UNItears oční kapky bez konzervačních látek, roztok je určen k vytvoření dočasného ochranného filmu na rohovce oka při nedostatečné tvorbě slz, čímž zvlhčuje a chrání povrch oka při stavech spojených se syndromem suchého oka a u pacientů s malými erozemi rohovky.

Indikace

UNItears oční kapky, roztok bez konzervačních látek, jsou určeny pro uživatele s:

- syndrom suchých očí různých etiologií (keratokonjunktivitida sicca, Sjögrenův syndrom, syndrom počítačového vidění, nositelé kontaktních čoček s mírnou a středně těžkou formou syndromu suchého oka, po operaci oka a/nebo poranění oka);
- drobné eroze rohovky různých etiologií (po odstranění malých částic nebo po operaci oka);
- nepříjemné pocity v očích (např. pálení, svědění, pocit cizího tělesa) v důsledku podráždění způsobeného větrem, prachem, cigaretovým kouřem, znečištěným vzduchem, kontaktními čočkami atd.

Cílová populace a uživatelé

Oční kapky UNItears mohou používat dospělí, dospívající a děti.

Omezení použití

- děti mladší 1 roku
- těhotné nebo kojící ženy


Dávkování

Doporučená dávka je 1–2 kapky do spojivkového vaku 2–6krát denně.

Pokyny před aplikací

Po otevření je roztok očních kapek UNItears bez konzervačních látek připraven k vkápnutí do oka.

1. Umyjte si ruce a pohodlně se posaďte nebo postavte.
2. Odšroubujte víčko lahvičky.

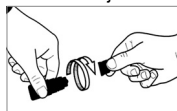


3. Držte lahvičku mezi palcem a ostatními prsty směrem dolů.
4. Před první aplikací se doporučuje ukápnout první kapku z oka jemným stlačením lahvičky, protože při silném a nerovnoměrném stlačení lahvičky může dojít k vystřikování většího objemu roztoku.
5. Prstem jemně stáhněte spodní víčko postiženého oka dolů.



6. Umístěte hrot kapátka blízko oka, ale tak, aby se nedotýkal oka ani přilehlých oblastí oka.
7. Jemně stiskněte lahvičku tak, aby se do oka dostala pouze 1–2 kapky, nebo více kapek v případě nutnosti vypláchnutí. Poté uvolněte spodní víčko a pomalu zavřete oko, aby se roztok očních kapek UNItears rovnoměrně rozprostřel po povrchu oka. Před dalším vkápnutím nechte vzduch do plastové lahvičky nasát, aby se vrátila do původního stavu, a poté pokračujte v aplikaci do oka podle doporučení.

Upozorňujeme, že mezi stisknutím a vytékáním kapky může uplynout několik sekund. Lahvičku nesmíte stisknout příliš silně.

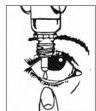

8. V případě potřeby postup opakujte pro druhé oko.



9. Po použití je třeba lahvičku jednou protřepat směrem dolů, aniž byste se dotkli hrotu kapátka, aby se odstranila veškerá zbytková tekutina na hrotu. To je nezbytné k zajištění sterility očních kapek a snazší aplikaci další kapky při následné aplikaci.
10. Ihned po aplikaci pevně uzavřete víčko lahvičky.

Kontraindikace

Oční kapky UNItears bez konzervačních látek, roztok, jsou kontraindikovány u:

- pacientů s precitlivělostí na kteroukoli složku zdravotnického prostředku.
- akutní fáze poleptání oka až do úplného odstranění leptavých látek ze spojivkového vaku a odstranění odumřelé tkáně
- dětí mladších 1 roku



Varování

- Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud jste alergičtí na některou složku přípravku. Pokud zaznamenáte jakékoli nežádoucí účinky, kontaktujte svého lékaře.
- Nepoužívejte tento přípravek, pokud si před prvním otevřením lahvičky všimnete, že je bezpečnostní kroužek šroubovacího uzávěru poškozený nebo je obal poškozen.
- Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, a to ani v případě, že je lahvička stále uzavřená. Datum expirace je uvedeno na štítku nebo krabičce vedle ikony přesýpacích hodin a vztahuje se k poslednímu dni v měsíci. Po otevření lahvičky lze přípravek používat pouze po dobu 3 měsíců.
- Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
- Při aplikaci přípravku se kapátko nesmí dotýkat oka ani očního víčka. Po aplikaci musí být uzávěr pevně zašroubován, aby se zabránilo možné kontaminaci.



Upozornění

Současné používání jiných očních přípravků

Pokud používáte i jiné oční kapky nebo masti, vyčkejte alespoň 5 minut mezi jednotlivými aplikacemi. Oční mast aplikujte jako poslední.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Krátce po vkápnutí přípravku do oka se může dočasně objevit rozmazané vidění. Proto neřídte motorová vozidla ani nevykonávejte jiné činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, dokud se vaše zraková schopnost nevrátí k normálu.

Pokud se nepříjemné pocity, kvůli kterým byl přípravek aplikován, nezlepší a přetrvávají, nebo se dokonce zhoršují, navštivte svého očního lékaře.

Aby se snížilo riziko křížové kontaminace a přenosu infekce, měla by obsah jedné lahvičky používat pouze jedna osoba.

Nežádoucí účinky

Oční kapky UNItears bez konzervačních látek, roztok, jsou velmi dobře snášeny. Vzácně se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:

- Alergická reakce, která se může projevit jako zarudnutí, svědění a otok očí
- Lokální podráždění (pálení, svědění, štípání, mírné nepohodlí)
- Hyperémie,
- Lepkavost očních víček,
- Dočasně rozmazané vidění

Jakýkoli závažný incident, ke kterému došlo v souvislosti s prostředkem, by měl být nahlášen výrobcem neziaduceucinky@unimedpharma.sk a příslušnému orgánu prostřednictvím národního systému hlášení členského státu, ve kterém je uživatel usazen.

Interakce Zatím nejsou známy.

Klinický přínos

Oční kapky UNItears bez konzervačních látek pomáhají zmírnit příznaky suchosti, podráždění, pálení a očního diskomfortu, zlepšují stav očního povrchu a podporují hojení.

Pokyny k uchovávání a likvidaci

Uchovávejte při pokojové teplotě 10–25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nepoužitý přípravek vraťte do lékárny. Čistý obalový materiál zlikvidujte zodpovědně v souladu s místními pokyny v příslušné nádobě na třídění odpad.

Obsah balení

Polyethylenová (LDPE) lahvička s kapátkem Novelia, závitový polyethylenový uzávěr s bezpečnostním kroužkem, etiketa. Plastová lahvička je balena v kartonové krabičce.

Velikost balení: 1 x 10 ml

Výrobce:



UNIMED PHARMA spol. s r.o.
Oriešková 11, 821 05 Bratislava
Slovenská republika
E-mail: unimedpharma@unimedpharma.sk
www.unimedpharma.eu

Význam piktogramů na obalu

	Výrobce		Číslo šarže
	Datum výroby		Použitelné do
	Teplotní omezení		Přečtete si návod k použití
	Zdravotnický prostředek		Nepoužívejte, pokud je obal poškozen, a řiďte se pokyny k použití
	Sterilizováno aseptickými technikami		Uchovávejte v suchu
	Uchovávejte mimo dosah slunečního záření		Upozornění
	Počet kapek v 1 ml		Jedinečný identifikátor přípravku

Datum poslední revize textu: březen 2025



Oriešková 11, 821 05 Bratislava,
Slovenská republika

